



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,  
emergencia y quirófano.

# NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



# NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN  
ACORDE A SU  
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES  
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN  
EN SU INSTITUCIÓN  
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD  
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-  
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL  
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES  
EN LÍNEA**

# CARDIODESFIBRILADORES



# Cardiodesfibrilador i2



Video del producto

Paciente:



Servicio:



- 4 en 1: Incluye modos desfibrilación, monitorización, estimulación no invasiva y DEA.
- Pantalla a color de 7", interfaz intuitiva y fácil de usar, que facilita la legibilidad de la información del paciente en cualquier.
- Funcionamiento en 3 pasos: Perilla seleccionadora de modo o energía, botón de carga y botón de descarga.
- Reanimación más rápida: Tiempo de carga en 5s a 200J y 8s a 360J.
- Ultraligero: 5,2 kg con batería incluida.





# Cardiodesfibrilador i2

- Paletas adulto-pediátricas con luces led indicadores de energía, botones seleccionadores de energía y botones de descarga.
- Puede ser utilizado en pacientes neonatales, pediátricos y adultos.
- Impresora de ECG integrada.
- Descarga de onda bifásica con tecnología BTE.
- Seleccionador de energía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, y 360J.
- Modo RCP: proporciona una guía visual y auditiva mientras monitoriza en tiempo real el rendimiento de los reanimadores.
- Portátil: Compacto, liviano, fácil de transportar con una mano, posee gancho para baranda de camas.
- Resistencia a golpes: El mango que absorbe los golpes y la pantalla de doble capa pueden soportar golpes y caídas graves.
- Protección IP54 contra polvo y agua lo hace adecuado para atención de emergencia y uso extrahospitalario.
- La batería recargable proporciona hasta 5 horas de monitoreo ininterrumpido.
- Tamaño: 32 x 20 x 12cm


## INCLUYE:

- Paletas adulto-pediátricas.
- Parches DEA.
- Cable ECG.
- Batería.
- Manual de usuario en español.

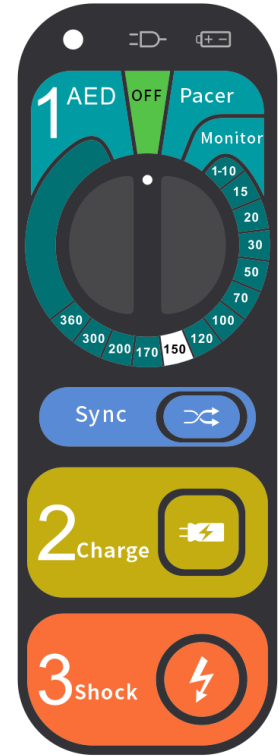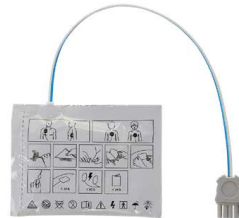


# Cardiodesfibrilador i2

## Modo DEA

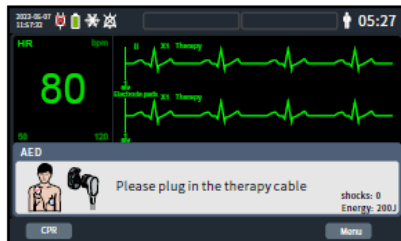

Este modo proporciona una descarga que salva vidas en cuestión de segundos, guiada por voz clara e indicaciones en pantalla.

## Desfibrilación Manual

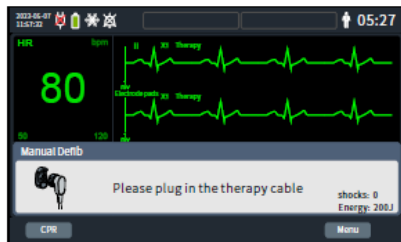

Incluye modos de funcionamiento asíncrono y sincrónico.

## Monitoreo de parámetros múltiples



Tres curvas, ECG de 3 derivaciones, y eventos.

## Estimulación no invasiva



i2 ofrece modo fijo y modo de demanda con velocidades y salida de marcapasos ajustables.



# Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Camas hospitalarias



Máquina de anestesia



Lámparas cialíticas



Mesas de cirugía

# Contáctanos

---

## DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

## EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

## TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

[www.dinipamedical.com](http://www.dinipamedical.com)